

# Mini Zentrifuge Z 130 M


Im Gegensatz zu herkömmlichen Mini Zentrifugen, ist das Austauschen der Rotoren bei der Verwendung von Mikroröhrchen und PCR-Streifen bei dieser Zentrifuge nicht mehr nötig. Der in der Zentrifuge beinhaltet und einzigartige KOMBI-Rotor ist alles, was benötigt wird, um 12 Mikroröhrchen und 4 PCR-Streifen gleichzeitig laufen zu lassen.

Mit einer festen Geschwindigkeit von 5500min<sup>-1</sup> ist diese Zentrifuge ideal für Schnellläufe.



## Leistungsbeschreibung

- Einzigartiger KOMBI-Rotor, für Röhrchen und Streifen
- Doppelte Kapazität einer Standard Mini Zentrifuge
- Startet und stoppt beim Schließen/Öffnen des Deckels
- Kompaktes Design
- Kurze Beschleunigungs- und Bremszeit
- Niedriger Geräuschpegel 52 dBA
- Gebaut nach internationalen Sicherheitsrichtlinien z.B. IEC 61010

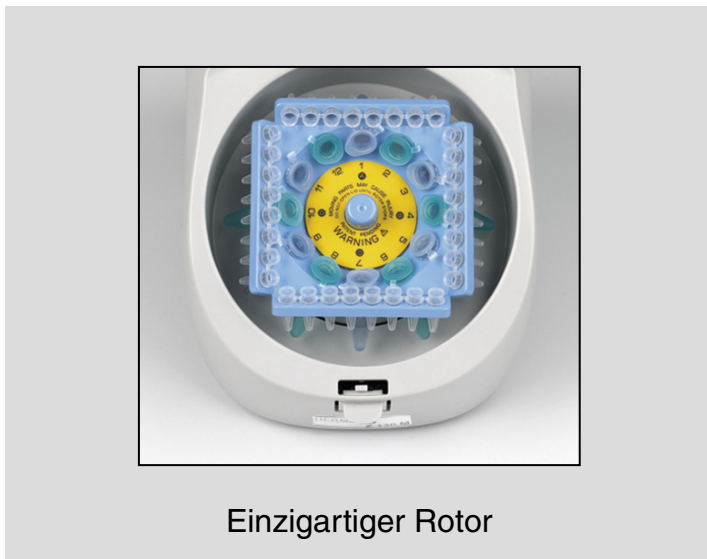

Einzigartiger Rotor



Kompaktes Design

## Technische Daten Z 130 M

max. Drehzahl: 5500 min<sup>-1</sup>  
max. RZB: 2000 xg  
max. Volumen: 12 x 1,5/2,0 ml Röhrchen  
32 x 0,2 ml PCR Röhrchen  
4 x PCR-Streifen (8x0,2 ml)

Abmessungen (B x H x T): 14 cm x 11,2 cm x 20 cm  
Gewicht: 1,3 kg

Bestellnummern:  
324.00 V01 - Z 130 M, 230 V / 50-60 Hz / 40 W  
324.00 V02 - Z 130 M, 120 V / 50-60 Hz / 40 W

# Mehr von HERMLE:



## Gekühlte Mikroliterzentrifuge Z 216 MK

max. Geschwindigkeit: 15000 min<sup>-1</sup>  
 max. Volumen: 44 x 1,5/2,0 ml  
 Beispielrotor: Winkelrotor 24 x 1,5/2,0 ml



## Universal Zentrifuge Z 306

max. Geschwindigkeit: 13500 min<sup>-1</sup>  
 max. Volumen: 4 x 100 ml  
 Beispielrotor: Ausschwingrotor 4 Plätze



## Gekühlte Universal Zentrifuge Z 326 K

max. Geschwindigkeit: 18000 min<sup>-1</sup>  
 max. Volumen: 4 x 100 ml  
 Beispielrotor: Ausschwingrotor 4 Plätze



## Universal Zentrifuge Z 326

max. Geschwindigkeit: 18000 min<sup>-1</sup>  
 max. Volumen: 4 x 100 ml  
 Beispielrotor: Ausschwingrotor 2 x 3 Mikrotiterplatten



## Gekühlte High-Speed Zentrifuge Z 36 HK

max. Geschwindigkeit: 30000 min<sup>-1</sup>  
 max. Volumen: 6 x 250 ml  
 Beispielrotor: Winkelrotor 6 x 250 ml



## Universal Zentrifuge Z 366

max. Geschwindigkeit: 20000 min<sup>-1</sup>  
 max. Volumen: 6 x 250 ml  
 Beispielrotor: Winkelrotor 12 x 1,5/2,0 ml

### HERMLE Labortechnik GmbH

Siemensstraße 25 • 78564 Wehingen

Telefon: 07426/9622-50 • Telefax: 07426/9622-49

E-Mail: [vertrieb@hermle-labortechnik.de](mailto:vertrieb@hermle-labortechnik.de) • Web: [www.hermle-labortechnik.de](http://www.hermle-labortechnik.de)

**HERMLE**  
 LABORTECHNIK

